


# ステッキ（伸縮式）

## 取扱説明書

### 1. 安全上の警告・注意

- 1) 杖としての用途以外に使用しないでください。また、本品は歩行を補助するためのもので、全体重を支えることはできません。
- 2) 杖に亀裂や変形がある場合は、折れるおそれがありますので使用しないでください。
- 3) お使いになる前に各部を点検してください。
- 4) 足ゴムが破れたり、すり減ったり、抜けやすくなった場合は、新しい足ゴムと交換してください。
- 5) 斜めに杖をついたり、濡れた路面や雪道等の滑りやすいところ、段差のあるところではじゅうぶん気をつけてご使用ください。

### 2. 製品概要

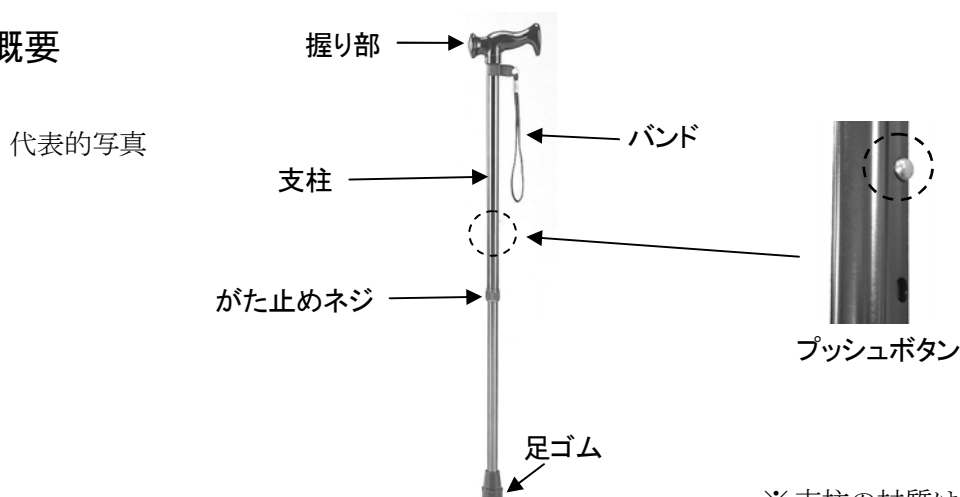

※ 支柱の材質はアルミニウム合金

商品名	注文コード	品番	全長	杖先径	握り部材質	重量
アルミ製伸縮式ステッキ、バンド付、プラスチック握り	502-012-03	PW-239	670～895mm	φ 19mm	プラスチック	335g
アルミ製伸縮式ステッキ、バンド付、木製握り	502-012-04	PW-222B	695～875mm	φ 17mm	木製	305g
アルミ製伸縮式ステッキ、パープル、バンド付、木製握り	502-012-22	PW-228P	715～940mm	φ 16mm	木製	280g
アルミ製伸縮式ステッキ、レッド、バンド付、木製握り	502-012-23	PW-228R				
アルミ製伸縮式ステッキ、グリーン、バンド付、木製握り	502-012-24	PW-228G				
アルミ製伸縮式ステッキ、チェリー、バンド付、木製握り	502-012-30	PW-228-CHERRY	715～940mm	φ 16mm	木製（天然木）	295g
アルミ製伸縮式ステッキ、ストロベリー、バンド付、木製握り	502-012-31	PW-228-129SH			木製（楓）	285g
アルミ製伸縮式ステッキ、フラワー柄、バンド付、アクリル製握り	502-012-32	PW-228-005MA			アクリル	305g
アルミ製伸縮式ステッキ、シルバー、バンド付、木製握り	502-012-33	PW-228S	715～940mm	φ 16mm	木製	280g
アルミ製伸縮式ステッキ、ブラック、バンド付、ソフトグリップ	502-012-52	PW-802SBK	710～935mm	φ 19mm	TPR	350g

### 3. 杖の長さの調節

- 1) がた止めネジを時計回りに回してゆるめます。
- 2) プッシュボタンを押し込み、支柱を上下にスライドさせて長さを調節してください。

【注文コード】

- ・ 502-012-04 : 固定穴の間隔 30mm ピッチで 7 段階調節
- ・ 502-012-04 以外 : 固定穴の間隔 25mm ピッチで 10 段階調節


**⚠ 注意**

調節後、プッシュボタンが固定穴から大きく飛び出ていること、  
がた止めネジにゆるみがないことを確認してください。

- 3) がた止めネジを反時計回りに回してしっかりと締めます。

【杖の高さの目安】

- 腕を垂直に下ろしたときの手首の位置に、握り部がくるようにします。
- 腰の曲がった方は、曲がった状態で合わせてください。
- 杖先をつま先の前方外側 15～20cm のところに置いたとき、体の縦の線と腕の角度が 30～40° になるようにします。

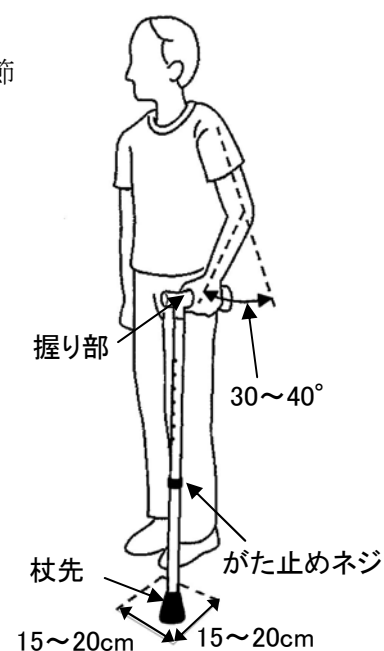

### 4. お手入れ

- 1) ご使用後は、汚れや水濡れを拭き取ってください。
- 2) 汚れがひどいとき、汚れが落ちにくいときは中性洗剤を含ませた柔らかい布で清拭してください。

### 5. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号

TEL 0725-53-5546    <http://www.muranaka.co.jp/>